

アイオドレープ取扱説明書

1 名で貼付する場合 (2 名で行う場合は、ベロ部、台紙の両端を二人それぞれ持ち同様に貼ってください)




事前に術野を医師の処方により消毒し、滅菌ガーゼ等で拭き取ります。

(30～60秒程度乾かします)

包装を開け、芯棒を取り除きます。

(注) 芯棒は貼付には必要ありません
取り除いてください。

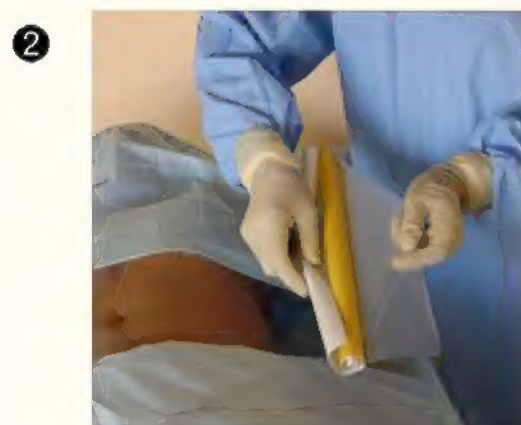

両手でベロ部と台紙の端を持ちます。



端からゆっくりと貼ってゆきます。



しわや空気が入らないように貼り広げます

(はがし方)

皮膚より取り除く場合には、フィルムを180° 折り返し、滑らせるようにしてはがします。粘着面の垂直方向へは引っ張らないでください。また、粘着境界部をこまめに手で押さえ移動し皮膚に過度の緊張をかけないようにする。リネンや布からはがす場合には、リネンを湿らせるか全体を水に浸してからのはがしてください。